

CASTELLINI

ES


STERILIZATION
Termoselladoras
Millseal



MAKING
SPACE
FOR
EXCELLENCE

UN FLUJO DE TRABAJO MÁS EFICIENTE

Las termoselladoras Castellini representan una solución funcional y fiable para el consultorio odontológico. Dotados de cortadora incorporada, los modelos Millseal+ Manual y Millseal+ Evo son prácticos y ergonómicos. En particular, la versión Millseal+ Evo está equipada con un simple control automático para gestionar el corte y la primera soldadura automática de grandes cantidades de bolsas. La termoselladora Millseal Rolling completa la gama: dotada de sistema de arrastre automático, es ideal para acelerar las actividades de soldadura y reducir considerablemente los tiempos de intervención de los operadores de la sala de esterilización.

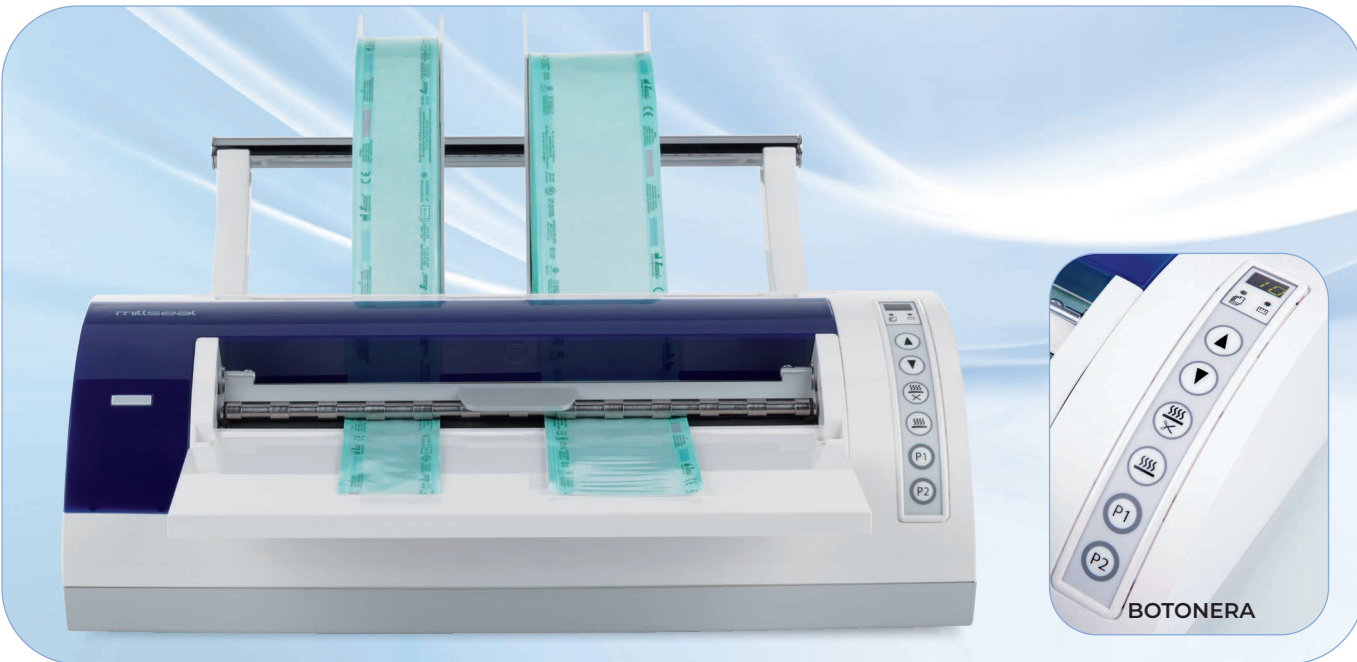


TERMOSELLADORA AUTOMÁTICA MILLSEAL+ EVO

Longitud y número de las bolsas visualizadas en el display. Sistema de desplazamiento bidireccional de los rodillos. Tecla de corte y primer sellado de la bolsa. Tecla de sellado definitivo de la bolsa. Teclas de programa para memorizar 2 longitudes distintas de bolsas y efectuar de modo automático las operaciones de sellado y corte.

UN PROGRAMA PARA CADA EXIGENCIA

Millseal+ Evo permite configurar dos programas diversificados en cuanto a la longitud y la cantidad de las bolsas. Después de haber seleccionado uno de ellos, la termoselladora prepara automáticamente las bolsas. Como alternativa, el operador puede intervenir manualmente envasando los instrumentos del modo tradicional.

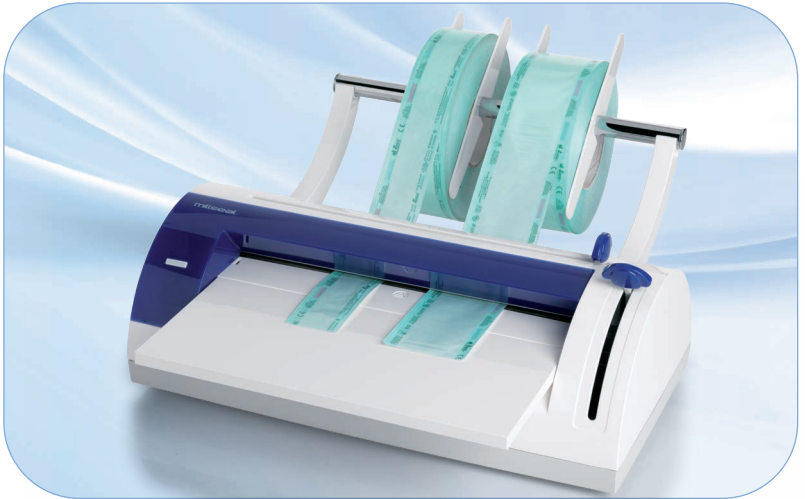

TERMOSELLADORA MILLSEAL+ MANUAL

La selección y el corte de la longitud de la bolsa se efectúan manualmente. Para cerrar la bolsa que contiene el material listo para la esterilización es suficiente presionar la palanca de soldadura hasta percibir la señal acústica que indica que se ha efectuado el sellado. El sistema que mantiene el papel en posición evita tener que volver a enrollar el rodillo después del corte y el sellado.



TERMOSELLADORA MILLSEAL ROLLING

Termoselladora de rodillos con sistema de arrastre automático. Con una calidad de tipo médico, resulta ideal para acelerar y optimizar el sellado de bolsas precortadas y soldadas en 3 lados. La banda de soldadura de 15 mm garantiza la esterilidad de los instrumentos envasados a lo largo del tiempo. Gracias a la regulación de la temperatura y de la presión de

soldadura, se obtiene un control eficaz del proceso de soldadura, lo que asegura prestaciones elevadas y constantes. Su amplio display permite programar y visualizar los parámetros operativos de modo simple e intuitivo. Los múltiples accesorios disponibles (transportador de rodillos, estante, cortadora) completan las funciones de este producto.



Datos técnicos	Millseal+ Evo	Millseal+ Manual	Millseal Rolling
Tensión de alimentación	220/240 Vac	220/240 Vac	220/240 Vac
Frecuencia de red	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Potencia nominal	150 W - 0.45 A	150 W - 0.45 A	600 W
Dimensiones externas (sin rollo)	474 x 374 x 200 mm (AxPxH)	474 x 374 x 200 mm (AxPxH)	512 x 236 x 145 mm (AxPxH)
Peso	6,5 kg	5 kg	10 kg
Tipo de soldadura	De ciclo continuo y temperatura constante	De ciclo continuo y temperatura constante	Rotativa de ciclo continuo
Temperatura nominal de ejercicio	180 °C	180 °C	80-190 °C
Altura de la banda de soldadura	12 mm	12 mm	15 mm
Anchura máxima de soldadura	300 mm	300 mm	10 m/min
Material sellable	Laminados de papel/polipropileno	Laminados de papel/polipropileno	• laminado de papel/película plástica para esterilización • laminado de Tyvek®/película plástica para esterilización • otros laminados de materiales compatibles con el procedimiento de termosellado
Diámetro máximo del rollo	200 mm	200 mm	



Making Your Life Better.

Bu Medical Equipment Sede Legale Ed Amministrativa Headquarters

Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a - 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

castellini.com

Stabilimento Plant

Via Bicocca, 14/c - 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601