

CASTELLINI

ES

TREATMENT
Asientos
C7 C8 C9



MAKING
SPACE
FOR
EXCELLENCE

Asientos C7 C8 C9

CONFORT Y BIENESTAR

Estudiados para asegurar una correcta postura y el bienestar en cualquier posición de trabajo, los nuevos asientos para el odontólogo y el auxiliar se integran a la perfección en los espacios de la clínica dental.

Las tres versiones del confort.



ASIENTO C7

C7 es un asiento optimizado para favorecer la actividad del médico ofreciéndole un soporte adecuado del cuerpo. Sus mecanismos de regulación hacen que el asiento y el respaldo se adapten a cualquier complexión y su diseño compacto permite acceder plenamente a todos los elementos del equipo. El material de revestimiento y su técnica de realización aseguran una fácil higienización de las superficies.




ASIENTO

La forma del asiento favorece la posición natural de las piernas y asegura una postura estable y cómoda en todo momento. El acolchado anatómico es suave y confortable y contribuye al bienestar del médico incluso en las intervenciones de larga duración.

RESPALDO

Las reducidas dimensiones del respaldo limitan la superficie de contacto, y en consecuencia la sensación de calor. Además, su forma ofrece un soporte perfecto para la zona lumbar en las fases operativas y durante el diálogo con el paciente.

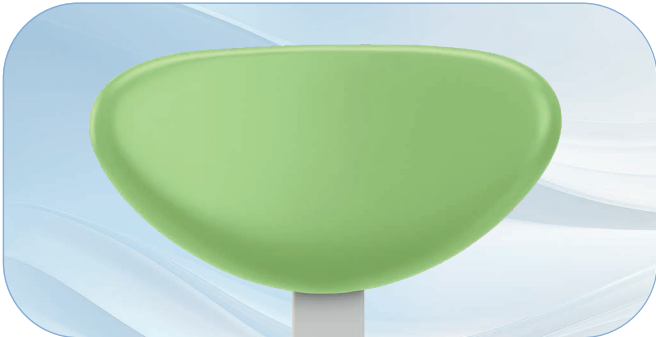


REGULACIÓN DEL ASIENTO

La regulación de la altura del asiento permite obtener una posición adecuada para garantizar siempre el apoyo de las piernas y una postura correcta de la columna vertebral. También se pueden añadir 10 cm más incorporando un accesorio opcional.



SOPORTE LUMBAR

El respaldo puede regularse en 9 alturas distintas, para proporcionar un soporte correcto a cualquier tipo de complexión.

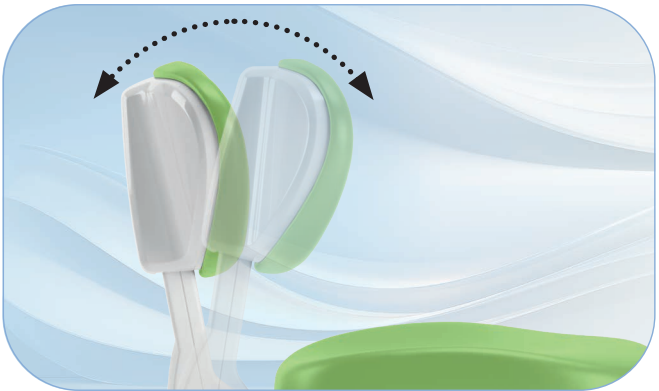

REGULACIÓN DEL RESPALDO

El usuario puede inclinar el respaldo de acuerdo con sus propias preferencias y modelar el asiento según su complexión personal.

ASIENTO C9

Gracias al diseño innovador del asiento tipo sillín, el médico puede acercarse al paciente sin necesidad de doblar la espalda, reduciendo de este modo el riesgo de fatiga física. El máximo confort en un volumen reducido a la mínima expresión.



POSTURA IDEAL

La forma de sillín garantiza una correcta inclinación de las piernas, por lo que mejora la postura de la espalda facilitando la aproximación al área de trabajo. Esta ergonomía asegura una sensación de energía y bienestar y minimiza el riesgo de padecer dolores musculoesqueléticos.



ASIENTO DINÁMICO

Gracias a un mecanismo basculante, el sillín acompaña dinámicamente los movimientos del cuerpo asegurando una postura activa y correcta en cualquier condición operativa. El ángulo de movimiento puede ser regulado fácilmente hasta el bloqueo en eje.



ACOLCHADOS

El acolchado está disponible en una versión sin costuras expuestas, para facilitar las operaciones de higiene, o en Memory Foam (opcional) para ofrecer un altísimo nivel de confort.

ASIENTO C8

El asiento C8 ha sido diseñado para ofrecer la máxima movilidad, un rápido acceso a todos los instrumentos y un apoyo perfecto de los brazos.



ASIENTO SIMÉTRICO

El asiento es circular, por lo que también resulta cómodo en caso de rotación del cuerpo. El asiento y el respaldo están desvinculados, por lo que el operador puede moverse libremente a 360 grados. La estructura del brazo ha sido diseñada para garantizar la estabilidad del antebrazo en cualquier posición.




BRAZO CÓMODO Y FUNCIONAL

El brazo es horizontal y está libre de aristas y revestido con un material antideslizante: de esta manera el auxiliar puede trabajar apoyando siempre el brazo en una posición cómoda y estable, incluso en caso


de largas sesiones. En la fase de montaje se puede optar por colocar el brazo en posición centrada o descentrada a la izquierda o a la derecha, en función de las necesidades del consultorio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


Asiento C7

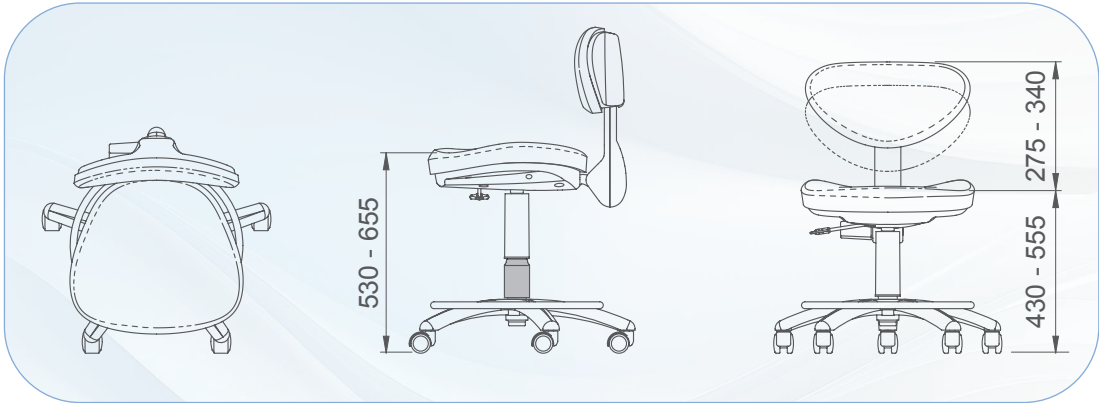

Asiento C8

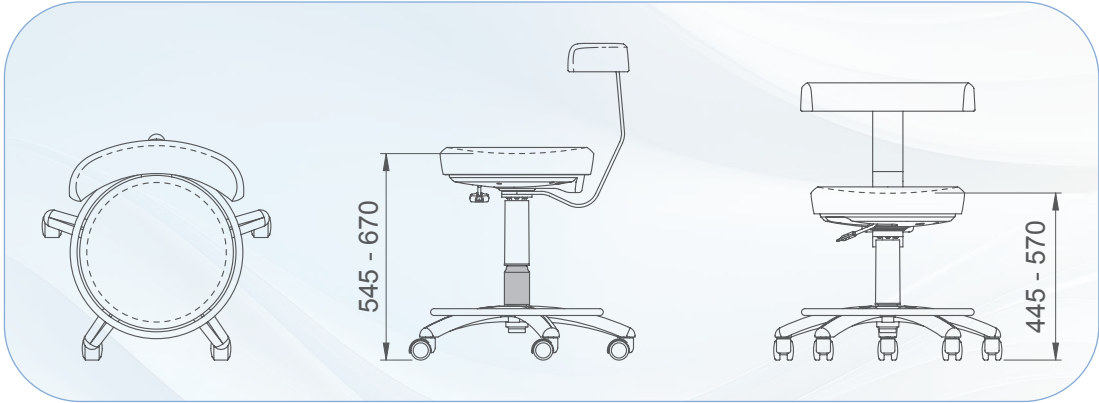

Asiento C9

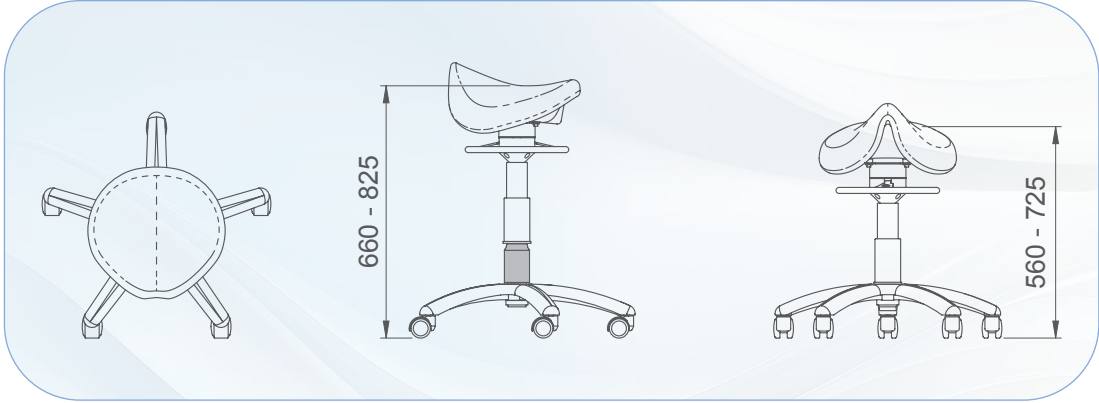

Las medidas de los dibujos están indicadas en milímetros

	Anillo reposapiés	Extensión 10 cm	Sistema balance	Acolchado estándar	Acolchado Memory Foam
C7	○	○	-	●	-
C8	○	○	-	●	-
C9	○	-	●	●	○

● = estándar ○ = opcional - = no disponible



EXTENSIÓN

Existe una práctica extensión opcional de 10 cm que permite adaptar perfectamente el asiento a cualquier complejión.



ANILLO REPOSAPIÉS

El anillo reposapiés está disponible como elemento opcional para todos los modelos y ofrece un apoyo sólido y cómodo al operador. Su acabado metálico facilita la limpieza.



STANDARD

- 102 azul atlántico
- 106 azul mediterráneo
- 113 azul pacífico
- 136 azul índico
- 132 violeta arándano
- 134 glicina japonesa
- 135 rojo veneciano
- 115 salmón escocés
- 103 amarillo nevada
- 123 verde polinesia

- 101 verde caribe
- 137 plateado brillante
- 121 gris antracita
- 130 negro grafito
- 142 avellana de Anatolia
- 141 beige papiro
- 143 oro árabe
- 140 marrón brasileño
- 144 rojo rubí

MEMORY FOAM

- 198 azul atlántico
- 196 azul mediterráneo
- 183 azul pacífico
- 186 azul índico
- 192 violeta arándano
- 184 glicina japonesa
- 194 rojo veneciano
- 195 salmón escocés
- 182 amarillo nevada
- 193 verde polinesia

- 197 verde caribe
- 187 plateado brillante
- 199 gris antracita
- 180 negro grafito
- 172 avellana de Anatolia
- 171 beige papiro
- 173 oro árabe
- 170 marrón brasileño
- 174 rojo rubí

CASTELLINI

PASSION FOR DENTISTRY

Since 1935

CSTOSP261500 02/2026
Debido a la constante actualización tecnológica de nuestros productos, las características técnicas indicadas pueden ser objeto de modificación sin previo aviso.
Según las normativas vigentes, en las áreas no comunitarias algunos productos o características pueden presentar disponibilidades y peculiaridades distintas. Te invitamos a contactar con el distribuidor local.



**Bu Medical Equipment
Sede Legale Ed Amministrativa
Headquarters**

Cefla s.c.
Via Selice Provinciale, 23/a - 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653111
fax +39 0542 653344

castellini.com

**Stabilimento
Plant**

Via Bicocca, 14/c - 40026
Imola - Bo (Italy)
tel. +39 0542 653441
fax +39 0542 653601